



blink® TotalCare

Täglicher Reiniger – Jetzt in nicht-schäumender Komfort-Formulierung

blink® TotalCare Täglicher Reiniger wurde entwickelt, um alle natürlichen Ablagerungen und Proteinansammlungen von der Kontaktlinsenoberfläche zu entfernen.

- Eine Kombination von sanften Inhaltsstoffen in einer „In-The-Eye“-Formulierung zur Entfernung von Schmutz, Ablagerungen und Proteinen von der Oberfläche aller harten und formstabilen gasdurchlässigen Kontaktlinsen
- Entwickelt für die Verwendung mit **blink® TotalCare** Desinfizierende Aufbewahrungs- und Benetzungslösung und mit **blink® TotalCare** Proteinentfernungstabletten als Teil des **blink® TotalCare** Pflegesystems
- Enthält einen Reiniger um die Entfernung von Fetten und Rückständen zu verbessern
- Mit einem speziellen Wirkstoff, um Proteinablagerungen von der Kontaktlinse zu entfernen


Produktinformation

Reiniger	Tyloxapol
Protein-entferner	Trometamol
Viskositäts-verstärker	Hydroxypropylmethylcellulose 0,15 %
pH	7,3 – 7,7
Konservierungs-mittel	Polyhexamethylenbiguanid


Darreichungsform: 2 x 15-ml-Dosierflasche



Eine Kombination von Inhaltsstoffen in einer tränenähnlichen Viskosität

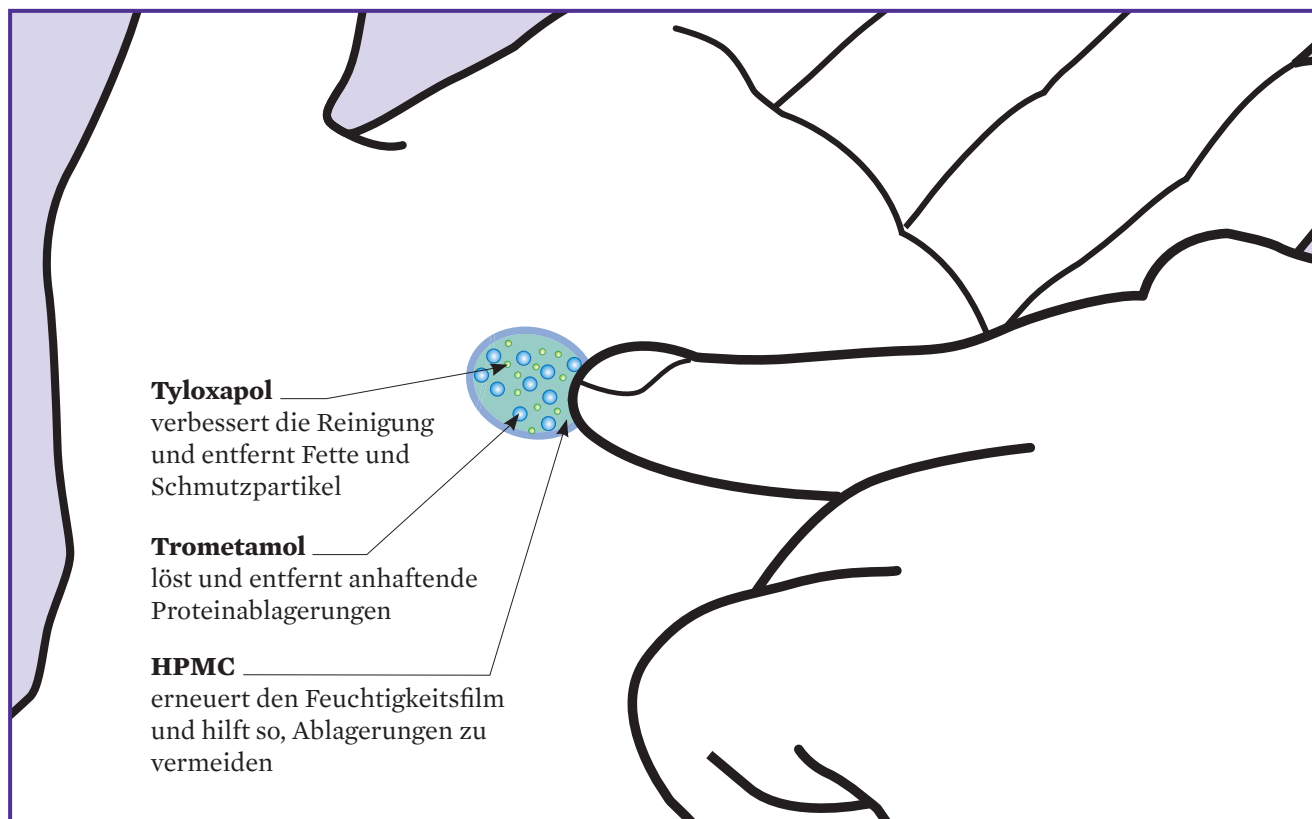

blink® TotalCare Täglicher Reiniger mit der Komfort-Formulierung Frisches Linsengefühl und hohe Reinigungsstandards¹

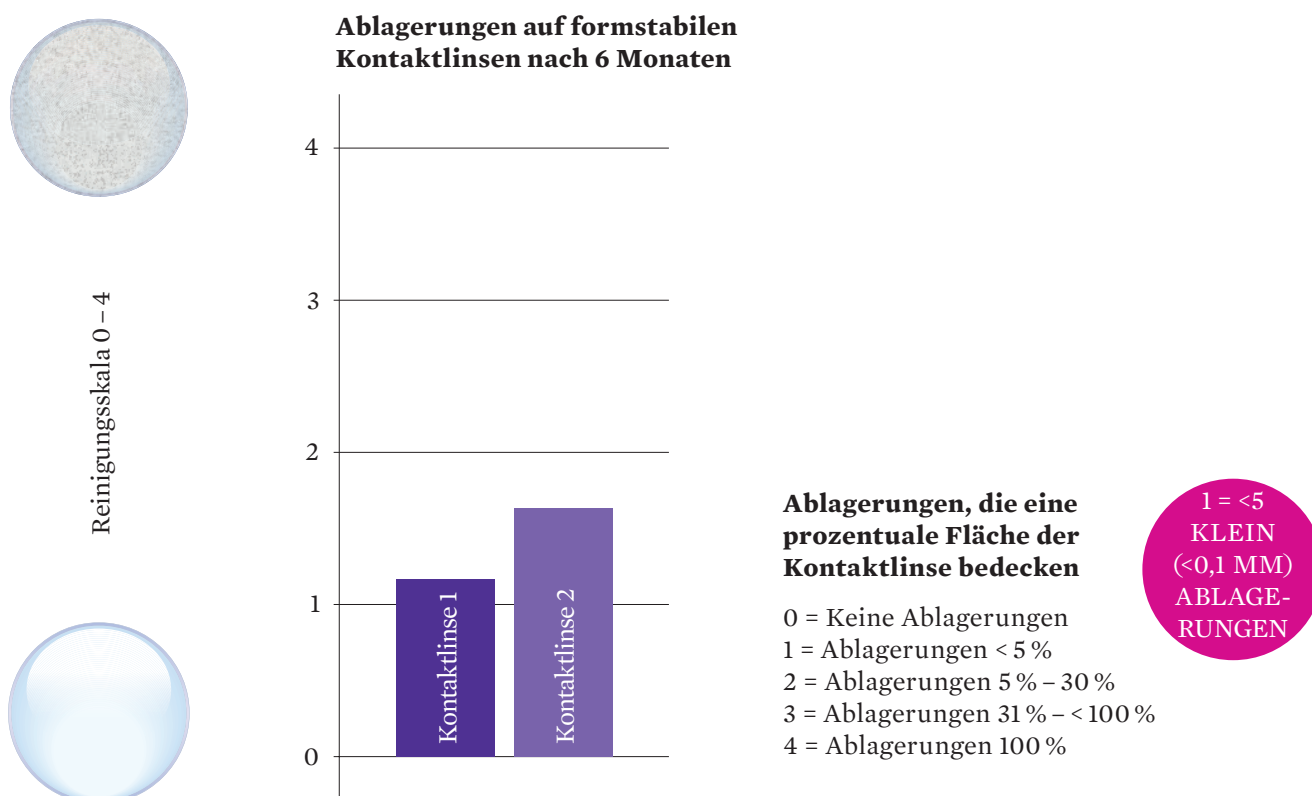


Ablauf der täglichen Pflege

Bitte waschen Sie sich vor der Kontaktlinsenpflege stets sorgfältig die Hände und trocknen Sie sie ab.

Reinigung

1. Linke Kontaktlinse vom Auge nehmen und auf die Handinnenfläche legen.
2. 2 – 3 Tropfen **blink® TotalCare** Täglicher Reiniger auf jede Kontaktlinsenfläche geben und 15 – 20 Sekunden mit dem Finger verreiben. Nicht im Kreis reiben, weil damit die Linsenränder nicht sauber gereinigt werden können.
3. Jede Seite der Kontaktlinse mit **blink® TotalCare** Desinfizierende Aufbewahrungs- & Benetzungslösung oder mit steriler Kochsalzlösung abspülen.
4. Kontaktlinse in den Halter der linken Kappe (L) legen und Kontaktlinsenbehälter mit dieser Kappe verschließen.
5. Kontaktlinsenbehälter mit **blink® TotalCare** Desinfizierende Aufbewahrungs- & Benetzungslösung füllen. Sicherstellen, dass der Kontaktlinsenbehälter vollständig bis oben gefüllt ist.
6. Vorgang mit der rechten Kontaktlinse wiederholen.

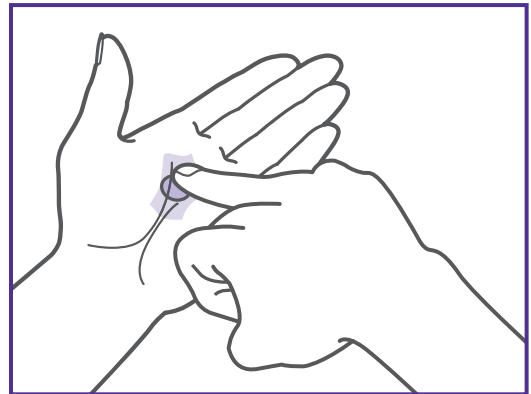

Das **blink® TotalCare** Pflegesystem ist so formuliert, dass der Tragekomfort verbessert und die Tragezeit für die Kontaktlinsen verlängert wird.

blink® TotalCare Täglicher Reiniger zur Entfernung aller natürlichen Ablagerungen und Proteinansammlungen von der Kontaktlinsenoberfläche (Inhalt: 2 × 15 ml)

Die **blink® TotalCare** Desinfizierende Aufbewahrungs- und Benetzungslösung sorgt für eine sichere Desinfektion, sie benetzt und konditioniert die Kontaktlinsen-Oberfläche für ausgezeichnete Spontanverträglichkeit und exzellenten Langzeit-Tragekomfort (Inhalt: 120 ml)

Die **TotalCare** Proteinentfernung einmal wöchentlich zusammen mit der **blink® TotalCare** Desinfizierende Aufbewahrungs- und Benetzungslösung angewendet, sichert sie den Erhalt der Sauerstoffdurchlässigkeit des Linsenmaterials. Sie findet gleichzeitig mit der Desinfektion im Linsenbehälter statt (Inhalt: 10 Tabletten)



Ein weiteres Produkt des **blink® TotalCare** Sortiments

blink® TotalCare TWIN PACK

Inhalt:

- 4 × 15 ml **blink® TotalCare** Täglicher Reiniger
- 2 × 120 ml **blink® TotalCare** Desinfizierende Aufbewahrungs- & Benetzungslösung
- 1 × Kontaktlinsenbehälter



Referenz:

1. AMO solution RGP clinical study. Centre of Contact Lens Research. University of Waterloo. February 2004.

AMO Germany GmbH • Rudolf-Plank-Str. 31 • 76275 Ettlingen • Germany
AMO Switzerland GmbH • Gubelstrasse 34 • 6300 Zug • Switzerland

blink und TotalCare sind Warenzeichen von oder lizenziert für Abbott Laboratories, deren Tochtergesellschaften oder angeschlossenen Firmen.

© 2017 Abbott Medical Optics PP2017CN0117

Johnson & Johnson VISION